

NeuroHarmonyM v2.2.3

Install Guide

Panaxtos

NeuroHarmonyM Parts

Case



Program CD



NeuroHarmony M Headband




Electrode

USB Cable




1. Insert an install CD, then Install Menu shows up.

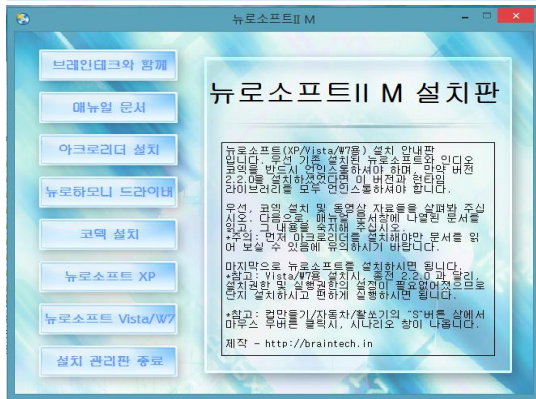


If Install Menu doesn't automatically show up, search 'autorun' file on install CD and run it by double clicking it.

이름	수정된 날짜	유형	크기
AutoPlay	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
Codec	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
Documents	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
USB Driver	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
Utility	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
Videos	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
Windows2000	2013-08-22 오전...	파일 폴더	
WindowsVista	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
WindowsXP	2014-02-18 오후...	파일 폴더	
autorun.exe	2013-08-21 오후...	응용 프로그램	6,272KB
autorun.inf	2009-01-14 오후...	설치 정보	1KB
lua5.1.dll	2011-01-21 오후...	응용 프로그램 확장	319KB
lua51.dll	2011-01-21 오후...	응용 프로그램 확장	11KB


2. Select a right version of NeuroSoft to your OS version(windows7 for windows8), the you see a Permission Menu. Press "Yes".

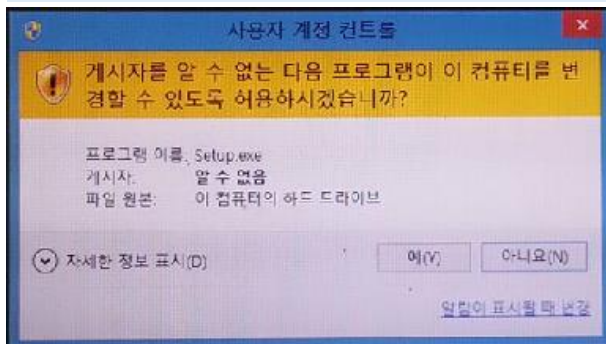


3. Install process is automatically processing with showing "Installing" message.

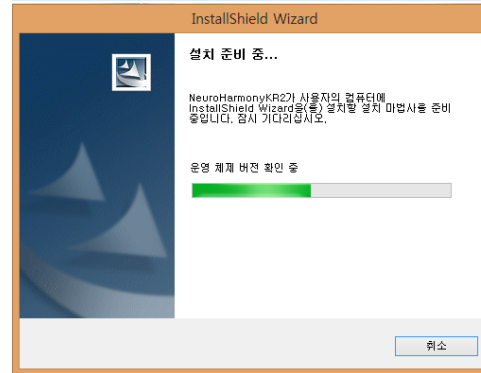


4. When you have "Install wizard is starting" message, press "Next".

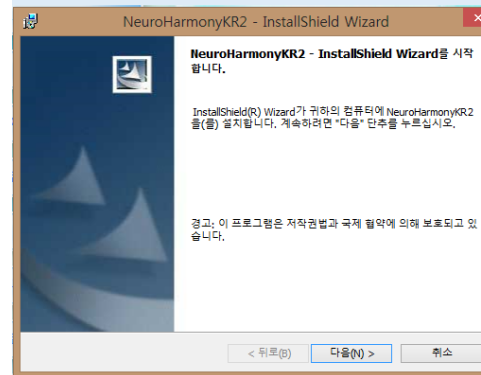


5. Select "agree with usage contract", and press "Next".

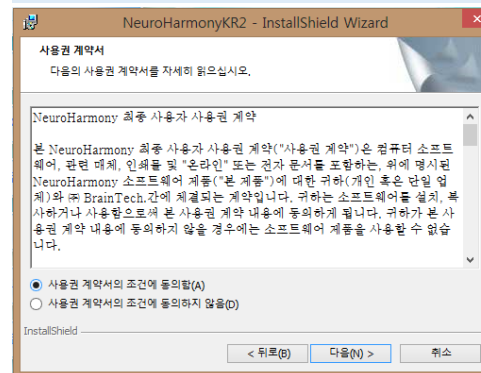


6. Type user information and press “Next”. If your computer is shared with other person, select “User only”.

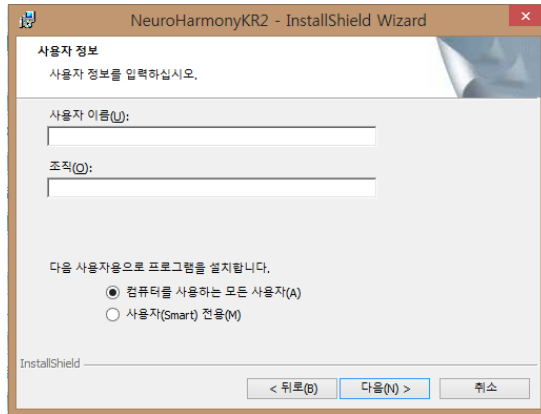


7. When “Program install ready” shows up, press “Install”.

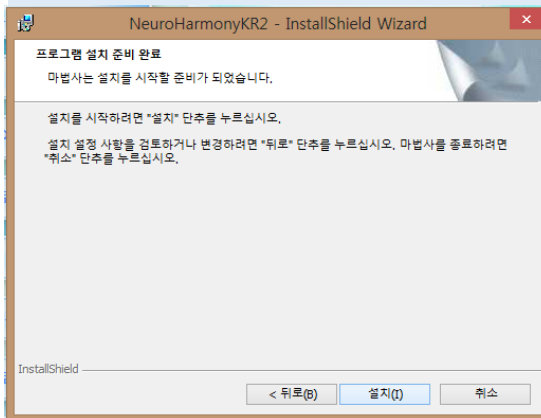

8. Now program is automatically being installed.

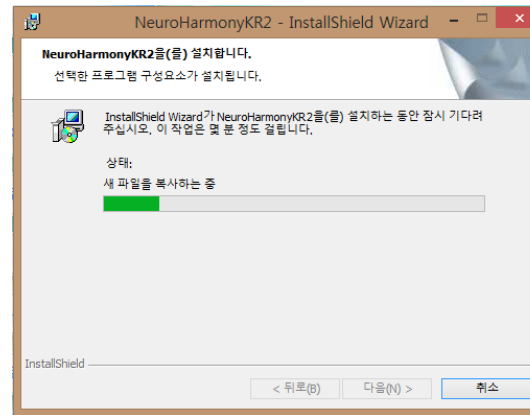


9. When install is finished, press “Exit”. Make sure that you have 3 icons on your screen.

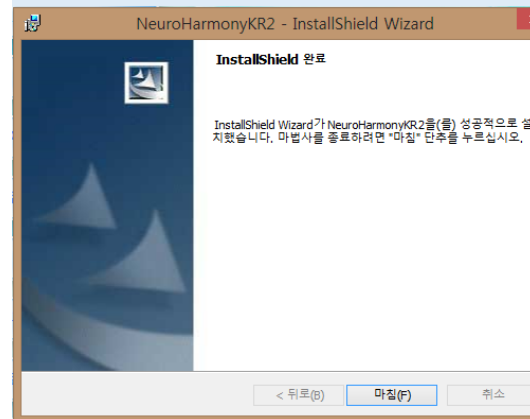


Installation of USB driver


1. In order to communicate Neuroharmony headband with your computer, USB driver must be installed. Select “NeuroHarmony Driver” in “Install Menu”. Then driver install menu appear. Press ‘Extract’.

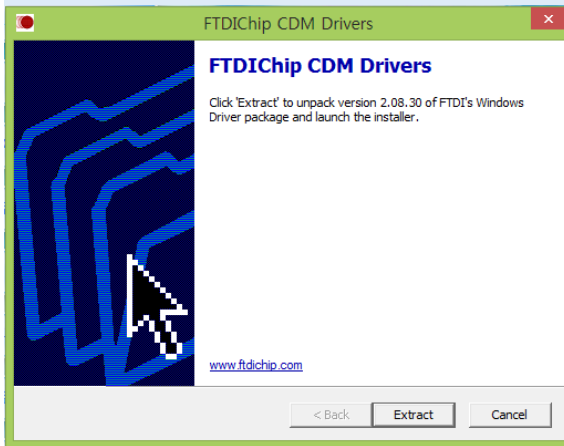

2. After driver files are automatically extracted, Install wizard appear. Press “Next”.

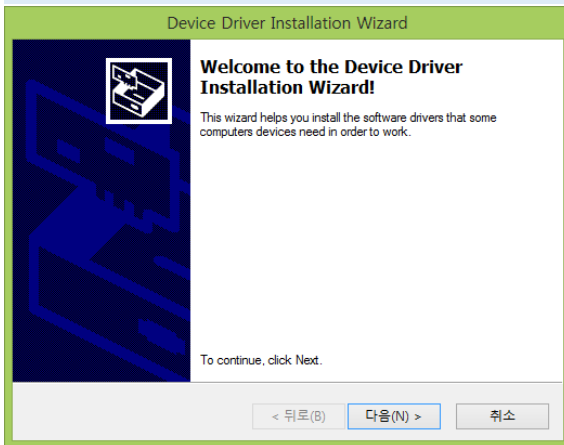


3. Installation is automatically precessed. When it is finished, press “Exit”.

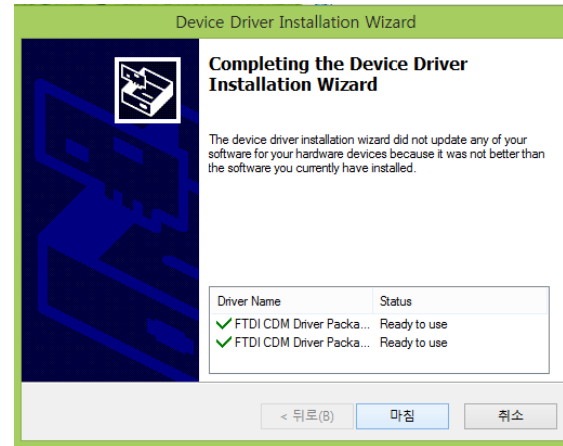


Installation of codec





1. Some of NeuroSoft programs need Xvid codec to run. Select “Install codec” in Install Menu. A Setup menu appear. Press “Next”.

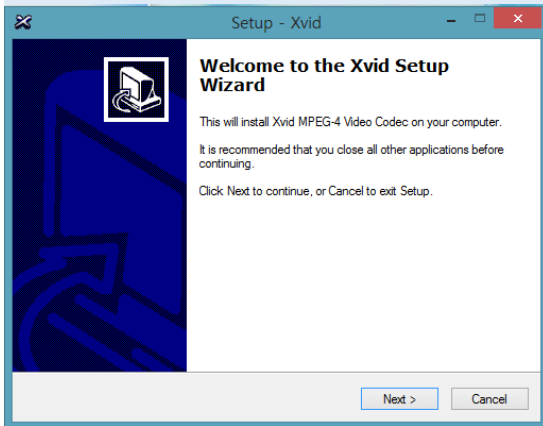



2. Select “Accept” in Agreement Menu, and press “Next”.

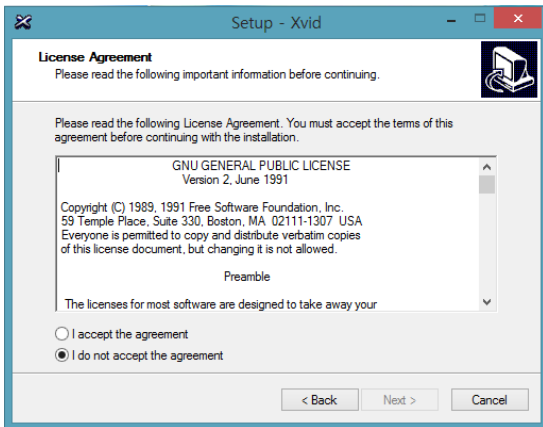

3. Press “Next” in following menus.

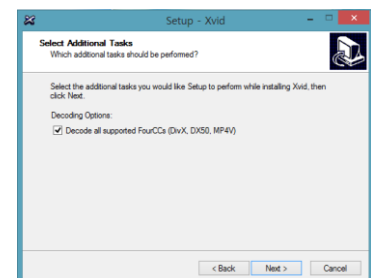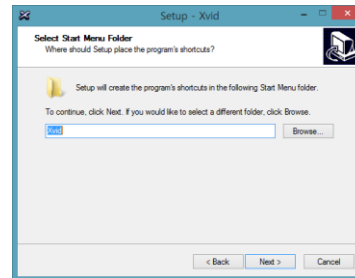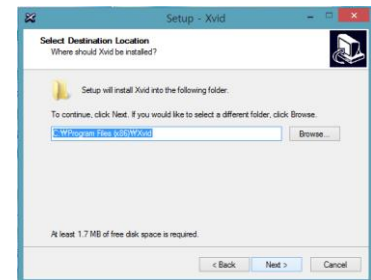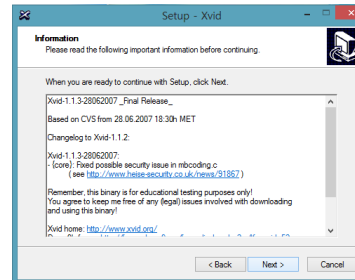

2. Press “Next” in Install Ready Menu, then installation is automatically done. When it is done, press “Finish”.

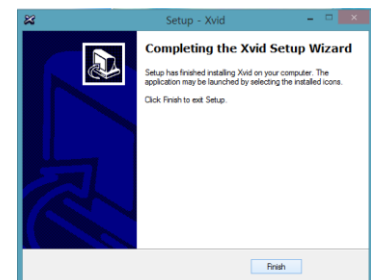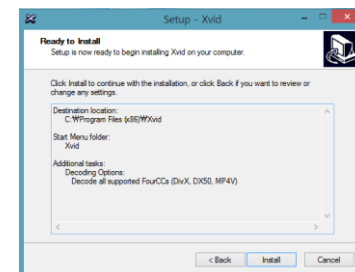

Compatibilty Setup

A user who uses Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 needs to setup compatibility with Windows XP.

1. Place a cursor on the program icon, press the left button of mouse. Select "Property" at the bottom of popup menu.



2. Select "Compatibility", check the box of compatible mode and select Windows X(service pack 3). Press "Confirm".

